

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

Assemblée de Refocalisation de Fibre Optique UV/VIS, Ouverture de 10 mm, 25 mm FL



Fiber Refocusing Assembly

Stock **#88-186** [CONTACT](#)

-

1

+

€355⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€355,00 prix unitaire
Qté 11-24	€313,00 prix unitaire
Qté 25-49	€295,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Refocusing Assembly

Type:

Anodized Aluminum

Matériau du Logement:

Remarque:
Compatible with [#88-180](#), [#88-181](#), [#88-190](#), & [#88-191](#) Fiber Collimators

Propriétés physiques et mécaniques	
15.88	Diamètre (mm):
10.0	Taille d'Ouverture:
16.38	Longueur (mm):
Propriétés optiques	
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
190 - 1250	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
25.00	Distance Focale FL (mm):
Environnement & durabilité	
-40 to 100	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Peuvent être couplés à des fibres optiques câblées standards de NA0,22
- Options de traitement disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
- Plusieurs ouvertures et distances focales proposées


Les Collimateurs Focalisables sont constitués de deux éléments distincts : un collimateur à fibre optique et un assemblage de refocalisation à fibre optique. Le collimateur à fibre optique utilise une lentille PCX positionnée à une certaine distance focale de l'extrémité de la fibre optique. Ces collimateurs sont disponibles avec ou sans connecteur FC ou SMA et se couplent facilement à des fibres optiques de 0,22 NA standards. Les Collimateurs Focalisables élargissent le faisceau et diminuent la divergence en faisant le rapport entre le diamètre du cœur de la fibre et l'ouverture du collimateur. Les assemblages de refocalisation à fibre optique se montent directement sur le collimateur à fibre optique et permettent une focalisation optimale à une distance donnée.




Informations techniques

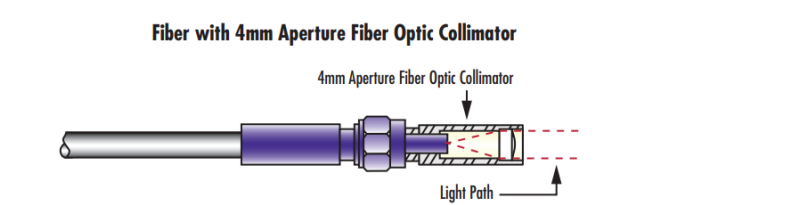

The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.

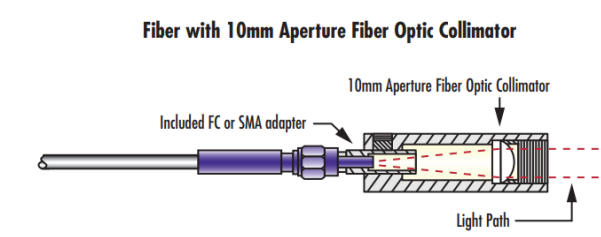

Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.

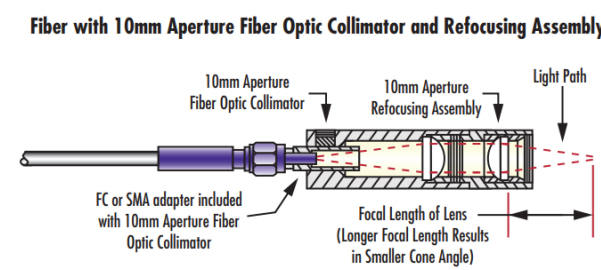

A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.

Collimator Description	Stock Number	Compatible Refocusing Assembly
4mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, FC	#88-189	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, SMA	#88-173	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC	#88-188	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA	#88-172	No Compatible Refocusing Assemblies
10mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, FC	#88-191	#88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187
10mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, SMA	#88-181	#88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC	#88-190	#88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA	#88-180	#88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187

;