

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

## Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm (avec vis micrométrique)



Stock **#55-456** 3 In Stock

-

1

+

€361<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €361,00 prix unitaire            |
| Qté 5+            | €343,20 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit                           |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Adjustable - Tip-Tilt                                 | Type:                      |
| Circular                                              | Type d'Optique:            |
| Available in Quick Start Kit: <a href="#">#17-519</a> | Remarque:                  |
| Micrometer                                            | Type of Adjustment Screws: |


| Propriétés physiques et mécaniques |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 22.0                               | Ouverture Utile CA (mm):                 |
| ±2.5                               | Angle d'Inclinaison (°):                 |
| ±2.5                               | Angle d'Inclinaison (°):                 |
| 3.0                                | Épaisseur min. des optiques compatibles: |
| Filetage & montage                 |                                          |
| 25.0 - 25.4                        | Taille des optiques compatibles (mm):    |
| M6 x 1.0                           | Compatible Post:                         |
| Conformité réglementaire           |                                          |
| Dispensé                           | RoHS 2015:                               |
| Visionner                          | Certificate of Conformance:              |
| Contains SVHC(s)                   | Reach 247:                               |

## Description produit

- Réglage de l'inclinaison par vis micrométrique ou vis-mère
- Molettes à code de couleur Tip et Tilt
- Les vis de fixation et les patins en Delrin® maintiennent le composant optique en place
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Les Montures Cinématiques d'Ajustement par le Haut se fixent aux tiges ou à d'autres optomécaniques, pour maintenir les composants optiques bien en place. Les micromètres ou vis de réglage sont positionnés en haut des montures, de manière à éviter toute interférence avec la mise en place du système. Le trou de montage M6 est positionné de manière à ce que la première surface du miroir monté soit aussi proche que possible de l'axe central du tige. Les Montures Cinématiques d'Ajustement par le Haut sont fabriquées en aluminium anodisé noir. Des [tiges](#) et les [supports de tiges](#) sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique.

## Informations techniques

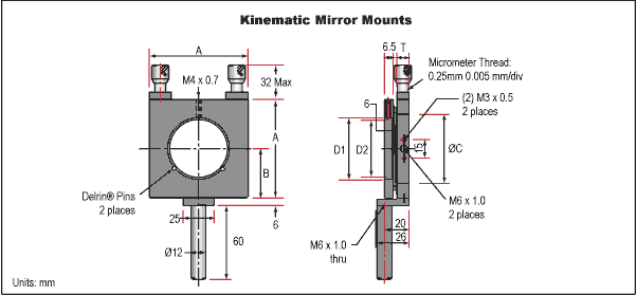

| Optic Diameter D1 (mm) | Clear Aperture, D2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Stock No.                |
|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 25.00                  | 22.00                   | 60.00  | 30.00  | 36.00  | <a href="#">#56-327</a>  |
|                        |                         |        |        |        | <a href="#">#56-238*</a> |
| 25.40                  | 22.00                   | 60.00  | 30.00  | 36.00  | <a href="#">#55-003</a>  |
|                        |                         |        |        |        | <a href="#">#55-456*</a> |
| 50.80                  | 47.00                   | 80.00  | 40.00  | 56.00  | <a href="#">#55-005</a>  |
|                        |                         |        |        |        | <a href="#">#56-326*</a> |
| 50.00                  | 47.00                   | 80.00  | 40.00  | 56.00  | <a href="#">#55-457*</a> |

\* with micrometer

