


[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

1/4-20 Adapter Plate Accessory for #03-607



50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607

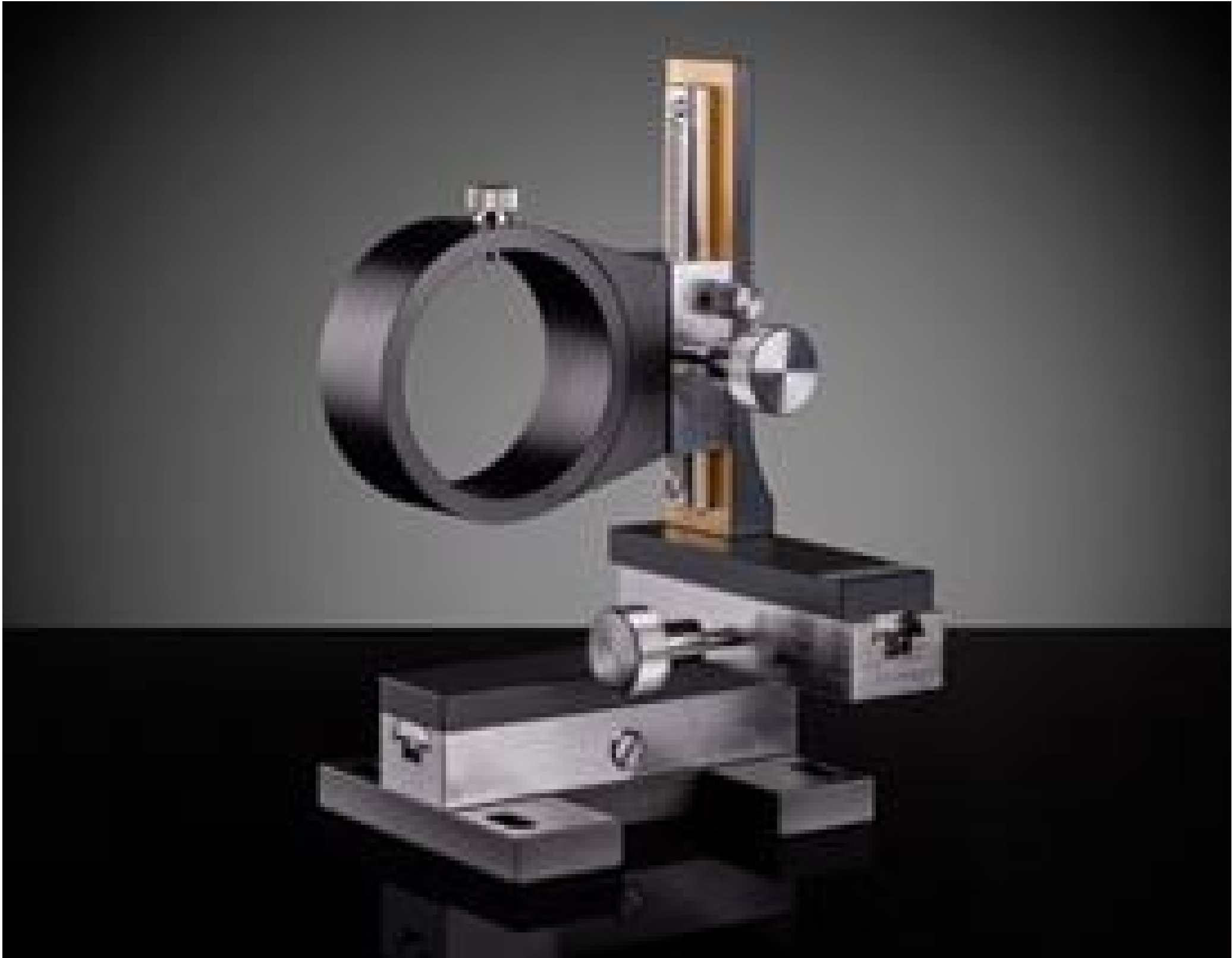

Stock **#54-491** **20+ In Stock**

-

1

+

€38^{.75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€38,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adapter Brackets & Plates

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

1.57

Longueur (pouces):

Longueur (mm):

40.00	
	Largeur (pouces):
0.94	
	Largeur (mm):
24.00	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 235:
Conforme	

Description produit

This item is used in conjunction with the X-Y-Z Positioning Movement ([#03-607](#)). This adapter plate accessory permits the positioning of mounting components to the stage and replaces the existing mounting ring attached to #03-607, which includes two M3 socket head cap screws to allow for mounting 1/4-20 Plate Accessory#54-491.

- Monture optique de 50 mm
- Base de montage durable incluse
- Mécanisme hélicoïdal crémaillère avec molette

La Plateforme de Positionnement X-Y-Z permet un positionnement exact dans les plans vertical, horizontal et en profondeur. La conception hélicoïdale précise de la crémaillère avec molette confère à ce composant la précision, la durabilité et la course nécessaires à l'intégration dans des systèmes optiques. L'anneau de montage de 50 mm de diamètre intérieur x 23,5 mm d'épaisseur du mécanisme est idéal pour tenir les lasers cylindriques, les cubes d'angle montés, etc. La Plateforme de Positionnement X-Y-Z s'assemble rapidement à l'aide d'un tournevis Phillips (non fourni). La Platine Adaptatrice 1/4-20 en option permet de monter des composants supplémentaires. Ce mécanisme pèse 1,22 kg.

Platine Adaptatrice 1/4-20 ([#54-491](#))

Cet accessoire est utilisé en conjonction avec la Plateforme de Positionnement X-Y-Z ([#03-607](#)). Cette platine adaptatrice permet de positionner les composants de montage sur la plateforme et remplace l'anneau de montage existant attaché à #03-607, qui comprend deux vis à tête creuse M3 pour permettre le montage de la platine adaptatrice 1/4-20 #54-491.

Informations techniques

